



ELEKTRICKÝ SONICKÝ ZUBNÍ KARTÁČEK 360°

Návod k použití

BATERIE

1. Informace o baterii

Tento produkt funguje za použití lithiové baterie odolné proti výbuchu.

- 1) Baterie je balena v měkkém polymerovém obalu, odolném proti výbuchu, bez rizika úniku, neobsahuje žádné těžké kovy.
- 2) Baterie má vysokou hustotu energie, větší než je u tradiční lithiové baterie.
- 3) Funguje při teplotě v rozmezí od -10°C do 60°C.

2. Ochrana životního prostředí

- 1) Lithiovou baterii v žádném případě nerozebírejte. Na baterii se nevztahuje záruka.
- 2) Baterii nelikvidujte spolu s běžným domácím odpadem, ale vyhodte ji do tříděného odpadu.

Poznámka

1. Standardní pracovní teplota výrobku je v rozmezí od 0°C do 50°C.
2. Kvůli svým vlastnostem výrobek nabíjejte při běžné pokojové teplotě.
3. Věnujte pozornost bezpečnosti - v případě, že produkt delší dobu nepoužíváte, odpojte jej z elektrické sítě.
4. Uchovávejte výrobek na suchém a chladném místě, nevystavujte jej přímému slunečnímu záření.

LED světelná kontrolka:

- Během nabíjení LED bliká kontrolka. Po úplném nabití LED kontrolka zhasne.
- Pokud LED kontrolka začne blikat, je zapotřebí kartáček nabít.

Ovládací tlačítko

- Krátkým stisknutím tlačítka kartáček zapnete a dalšími stisknutími vyberete vhodný režim pro své dítě (1-3 stisknutí).
- Čtvrtým stisknutím tlačítka kartáček vypnete.
- Zvolený režim trvá 2 minuty.
- Režim I je vhodný pro děti ve věku 2-4 roky, režim II 4-6 let, režim III 5-8 let.

Nabíjení


- Doba výdrže nabití přístroje závisí na používaném režimu:
 - režim I – 22 dní
 - režim II – 18 dní
 - režim III – 14 dní
- Platí za předpokladu, že je kartáček plně nabitý a čištění zubů probíhá 3x denně.
- Výše uvedená data jsou skutečným výsledkem laboratorních testů.

Vlastnosti

- **Antibakteriální materiál chránící životní prostředí s protiskluzovou úpravou**
Pohodlné, dlouhodobé, čisté.
- **Silikonový antibakteriální materiál vhodný pro styk s potravinami**
360° kontakt s dásněmi a zoubky.
- **Chrání proti atrofii dásní**
Podporuje krevní oběh a snižuje riziko onemocnění dásní.
- **Bezdrátové nabíjení**
Jedno nabíjení, dlouhá životnost baterie, úspora energie a ochrana životního prostředí.
- **Dotykové tlačítko**
Jediným kliknutím spustíte proces čištění zoubků.
- **Třístranný kartáček 360°**
Zajistí kompletní vyčištění zoubků.
- **Inovativní způsob držení**
Usnadňuje čištění.
- **Hlava kartáčku je dokonale spojena s rukojetí**
Dokonale vyčistí všechny zoubky.

Funkce výrobku

1. Části výrobku

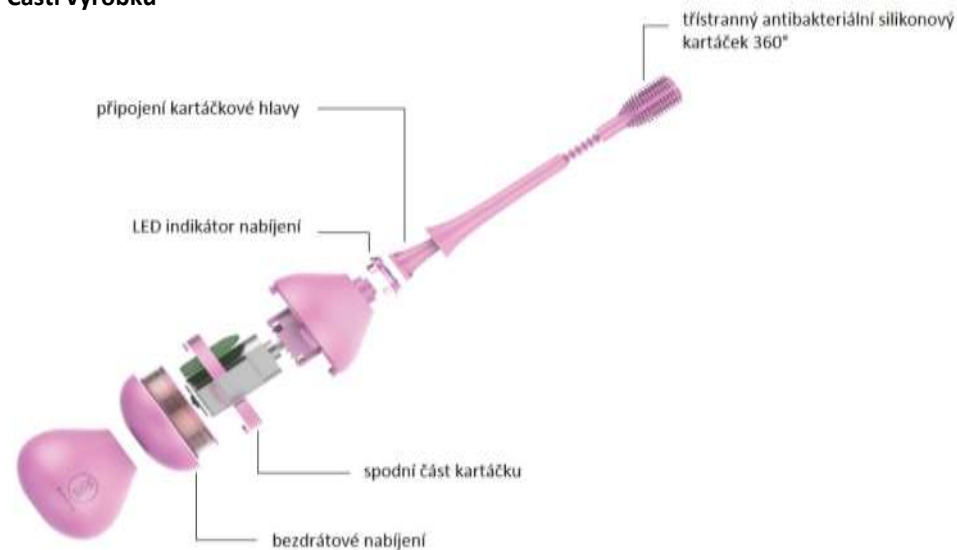

2. Nabíjení výrobku

Umístěte kartáček na nabíjecí základnu, která je pomocí USB připojena k elektrické síti (5V/500mA), poté se kartáček začne nabíjet.

Nabíjení

Bezdrátová metoda nabíjení s největším smyslem pro vědu a technologii v dnešní moderní době.

bezdrátové nabíjení



Pouhým stisknutím jediného tlačítka ve spodní části můžete zažít nadstandardní způsob čištění zoubků. Velmi jednoduchá obsluha bez zbytečných ovládacích tlačítek.

dotykové tlačítko

Použití

1.krok

Nejdříve nasadte kartáčkovou hlavu na elektrickou základnu tahem dolů. Pokud je třeba vyměnit hlavu kartáčku, vytáhněte ji v opačném směru a nahraďte ji novou.



2.krok

Po nasazení kartáčkové hlavy vytlačte zubní pastu mezi štětinky, aby nedošlo k jejímu nechtěnému spadnutí.



3.krok

Po stisknutí tlačítka ve spodní části začne zubní kartáček fungovat. Stisknutím zvolíte 1 ze 3 režimů. Během provozu držte kartáček za spodní část. Opětovným stisknutím kartáček vypnete.



4. krok

Po použití umístěte elektrický zubní kartáček na nabíjecí základnu. Zakryjte jej průhledným krytem, aby během nabíjení nedošlo ke znečištění kartáčkové hlavy.

Parametry výrobku

rozměry: 66 x 66 x 160mm

doba nabíjení: 3 hodiny

hmotnost:175g

350mAh