



KilöPro

Vývojová váha

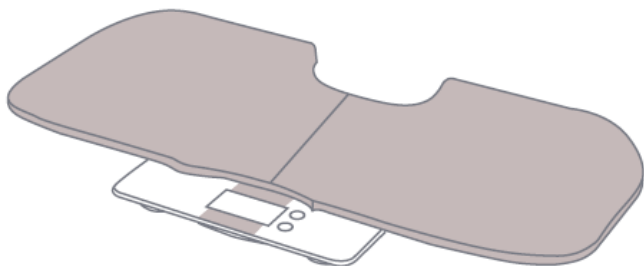

Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.

Distributor pro Českou republiku a Slovensko:
Andys Czech s.r.o., Márova 2805/6, 155 00 Praha,
www.andys.cz

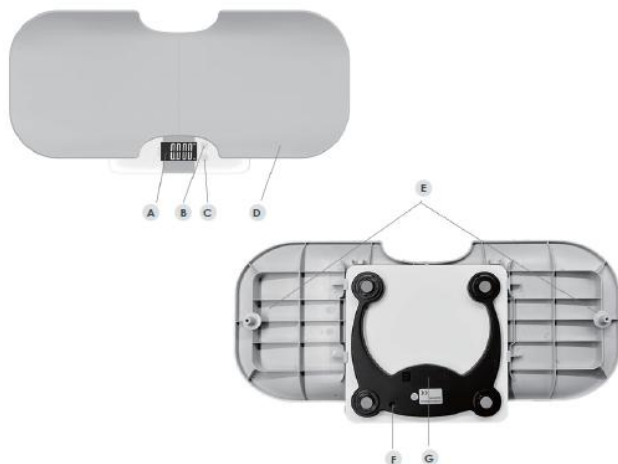

A LCD displej

B Napájení – tlačítko Tare

C Orientace LCD displeje – tlačítko podržení

D Podnos

E Držáky podnosu

F Tlačítko pro výběr jednotek

G Přihrádka na baterie

NASTAVENÍ

JAK VLOŽIT BATERIE?

Odšroubujte kryt bateriového prostoru pod váhou otočením šroubu proti směru hodinových ručiček a kryt zvedněte za jazýček. Vložte dvě baterie typu „AAA“ podle značek polarit uvnitř prostoru. Nasadte zpět kryt bateriového prostoru. Když se na LCD displeji objeví „Lo“, je třeba baterie vyměnit.

JAK NAMONTOVAT PODNOS?

1. Vyjměte držáky podnosu se šrouby z plastového sáčku vedle podnosu.
2. Připevněte držák podnosu na zadní stranu podnosu pomocí šroubu.
3. Sestavte podnos.
4. Nasuňte podnos na váhu tak, že zarovnáte drážky na spodní straně podnosu se stranami váhy a zatlačíte podnos na váhu, dokud se výstupky na spodní straně podnosu nedotknou spodního okraje váhy.



KDE UMÍSTIT VÁHU?

Váhu umístěte na rovný, stabilní povrch, aby bylo zajištěno přesné měření.

POUŽITÍ

1. Stiskněte tlačítko napájení/Tare (B) pro aktivaci váhy. Jakmile se na LCD displeji objeví nuly, váha je připravena k použití.

2. Při zapnuté váze stiskněte tlačítko pro výběr jednotek (F) umístěné pod váhou vedle přihrádky na baterie a vyberte jednotky „kg“ (kilogramy), „lb“ (libry), „oz“ (unce) nebo „lb:oz“ (libry a unce).

POZNÁMKA: Výchozí nastavení je „kg“. Váha si zapamatuje vaši poslední volbu, dokud nebudou vyměněny baterie.

3. Krátkým stisknutím tlačítka LCD/Hold (C) nastavte požadovanou orientaci displeje.

4. Opatrně položte dítě na podnos, přičemž věnujte zvláštní pozornost jeho hlavičce. Pokud nechcete dítě pokládat přímo na vážicí plochu a dáváte přednost použití ručníku nebo deky, položte ručník/deku nejprve na váhu. Váha je vybavena automatickou funkcí TARE pro váhy v rozmezí 0 až 500 gramů. Upozorňujeme, že váha zůstane viditelná po dobu 5 vteřin, než se resetuje na nulu. Pokud na váhu položíte něco přes 500 gramů, krátce stiskněte tlačítko Napájení/Tare (B) pro ruční spuštění funkce Tare. Na LCD displeji se krátce zobrazí „-----“ a váha se resetuje na nulu.

5. Tato váha má automatickou i manuální funkci HOLD. Funkce Auto Hold zobrazí hmotnost, jakmile se stabilizuje natolik, aby bylo možné zjistit přesnou hodnotu, a zobrazí se po dobu asi 30 sekund.

POZNÁMKA: Pokud se dítě příliš hýbe, funkce Auto Hold se neaktivuje. V takovém případě stiskněte tlačítko LCD/Hold (C), když je dítě co nejklidnější. Do tří sekund přestanou čísla blikat a zobrazí se hmotnost.

6. Chcete-li váhu vypnout, stiskněte a podržte tlačítko Napájení/Tare (B). Váha se také sama vypne po asi 30 sekundách.

VÁŽENÍ STOJÍCÍ OSOBY

1. Sejměte z váhy podnos (pokud je připojený).

2. Krátce stiskněte tlačítko napájení/tárování (B) pro aktivaci váhy.

3. Krátce stiskněte tlačítko LCD/Hold (C) pro natočení LCD displeje tak, aby byl čitelný, když na váze stojíte, s LCD displejem směrem dopředu.

POZNÁMKA: Tlačítko Power/Tare (B) přestane fungovat, když se váha používá tímto způsobem, aby se zabránilo nechtěnému spuštění váhy nohou uživatele, pokud stojí na tlačítku LCD/Hold (C).

4. Když váha ukazuje nulové hodnoty, stůjte nehybně na váze s nohama rozkročenými, dokud se váha nestabilizuje a nezobrazí se na LCD displeji.

5. Váha se po asi 30 sekundách sama vypne.

CHYBY A ŘEŠENÍ

EEEEEE

Příčina: Překročena kapacita 180 kg (396 lb)

Řešení: Nepřekračujte maximální váhu

Lo

Příčina: Slabé baterie

Řešení: Vyměňte baterie

Žádný displej

Příčina: Baterie jsou vybité nebo vložené nesprávně

Řešení: Vyměňte baterie a ujistěte se o správné polaritě

Váha ukazuje nereálný výsledek

Příčina: Váha je umístěna na měkkém povrchu nebo během měření došlo k pohybu

Řešení:

Umístěte váhu na tvrdý povrch (ne na koberec)

Stůjte klidně během měření

Počkejte, až se váha sama vypne, a zopakujte měření

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Typ baterií: 2× AAA

Měřicí rozsah: 0,5 kg až 180 kg (1,1 lb až 396 lb)

Rozlišení:

5 g (0,01 lb) přírůstky (0–20 kg / 0–44 lb)

50 g (0,1 lb) přírůstky (20–180 kg / 44–396 lb)

Teplotní rozsahy:

Provoz: 5 °C až 40 °C (41 °F až 95 °F), relativní vlhkost 20–85 %

Skladování: -20 °C až 60 °C (68 °F až 140 °F), relativní vlhkost 20–90 %

Měrné jednotky: kg, lb, oz, lb: oz