



GIO-731 – pleťová špachtle

UŽIVATELSKÝ MANUÁL
ultrazvuková špachtle na čištění
pleti


Aby se zabránilo zranění způsobeným nesprávným používáním, přečtěte si pozorně instrukce a používejte tento výrobek výhradně v souladu s návodem.

Distributor pro Českou republiku a Slovensko: Andys Czech s.r.o., Márova 2805/6, 155 00 Praha, www.andys.cz

POPIS

HLAVICE

TLAČÍTKO
NAPÁJENÍ

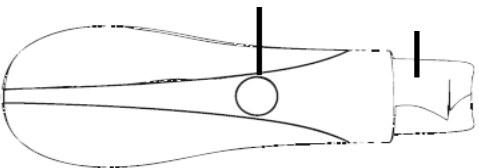

KRYT BATERIE



BEZPEČNOSTNÍ A ÚDRŽBOVÉ POKYNY

Před použitím

- Vložte baterie (2xAAA, nejsou součástí balení) a pevně uzavřete kryt baterií.
- Před použitím se ujistěte, že je hlavice přístroje čistá a suchá.

Během používání

- Používejte pouze na vlhkou pokožku – nikdy na suchou pokožku.
- Doporučené použití: 1–2krát týdně, maximálně 10 minut na jedno použití.
- Nepoužívejte na poraněnou, zanícenou, podrážděnou nebo popálenou pokožku.
- V případě bolesti nebo nepohodlí okamžitě přestaňte zařízení používat.
- Vyhněte se používání kovových předmětů (např. šperků, klíčů) v blízkosti zařízení.
- Toto zařízení není vodotěsné – nepoužívejte ve sprše ani ve vaně.

Po použití

- Hned po každém použití očistěte hlavici zařízení papírovým ubrouskem nebo měkkým hadříkem.
- Před uložením se ujistěte, že na zařízení nezůstaly žádné zbytky krému, gelu nebo vlhkosti.
- Uchovávejte na chladném a suchém místě mimo dosah přímého slunečního záření, zdrojů tepla a vlhkosti.
- Uchovávejte zařízení na bezpečném místě mimo dosah dětí.

POUŽITÍ

Před začátkem vždy pokožku hydratujte!

Krok za krokem:

- Odstraňte make-up a pokožku obličeje důkladně hydratujte pomocí spreje nebo mlhy.
- Pro větší účinnost pokožku zahřejte pomocí horkého ručníku.
- Držte zařízení tak, aby se vaše ruka nedotýkala kovové desky.
- Nakloňte zařízení do úhlu 30°–45°.
- Jemně pohybujte ve směru, dle oblasti obličeje (viz níže) – vždy klouzejte, netlačte.
- Po použití vypněte a vyčistěte zařízení.
- Naneste tonikum nebo sérum, abyste dokončili péči o pleť.

Jak pohybovat peelingovou hlavicí:

BRADA – směr nahoru

NOS – klouzejte odspodu nahoru

TVÁŘE – pohybujte od středu směrem ven a nahoru.

OBLAST RTŮ – klouzejte směrem ke středu obličeje

Nepoužívejte na:

- Okolí očí nebo na oči
- Oční víčka
- Infikovanou, poraněnou nebo velmi citlivou pokožku