


GIO perfect

EMS Lifting Device

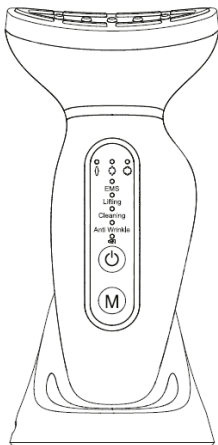

Aby nedošlo k poškození způsobenému nesprávným používáním, přečtěte si pozorně pokyny a používejte tento výrobek výhradně v souladu s návodem.

Distributor pro Českou republiku a Slovensko: Andys
Czech s.r.o., Márova 2805/6, 155 00 Praha,
www.andys.cz

POPIS VÝROBKU

LED


terapeutické
světlo
(červené /
modré /
zelené)

Indikátory
intenzity

Lifting

Proti vráskám

Nabíjecí
USB-C port

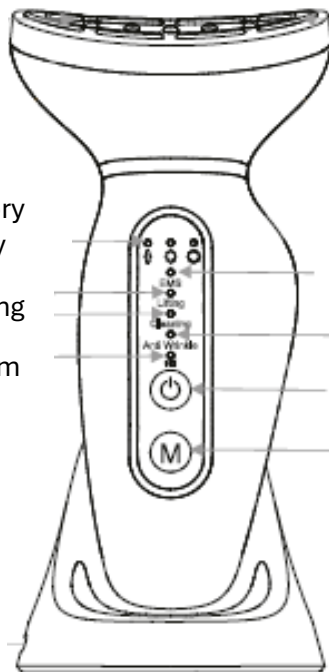

Masážní
hlavice

EMS

Čištění

Tlačítko
zapnutí /
intenzity

Tlačítko
režimu

Popis jednotlivých režimů

1. EMS – červené světlo

EMS stimulace pomáhá zpevňovat pokožku, redukovat viditelnost vrásek a stimulovat obličejové svaly.

2. Lifting – EMS + teplý obklad, červené světlo

Teplá masáž kombinovaná s EMS stimulací podporuje krevní oběh a zlepšuje pružnost pokožky.

3. Čištění – vibrace + EMS, modré světlo

Pomáhá čistit a osvěžovat pokožku, odstraňovat nečistoty z pórů a stimulovat kožní buňky.

4. Proti vráskám – vibrace, zelené světlo

Pomáhá uvolňovat obličejové a krční svaly, zlepšovat krevní oběh a vyhlazovat jemné linky.

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ PŘÍSTROJE

Stisknutím tlačítka napájení po dobu 2 sekund přístroj zapnete nebo vypnete.

Po zapnutí se přístroj automaticky spustí v režimu EMS s červeným světlem.

Změna režimu

Stisknutím tlačítka režimu přepínáte mezi dostupnými režimy.

Nastavení intenzity

Krátkým stisknutím tlačítka napájení nastavíte intenzitu vibrací.

K dispozici jsou tři úrovně intenzity:

- nízká
- střední
- vysoká

Automatické vypnutí

Přístroj se po 15 minutách používání automaticky vypne.

NABÍJENÍ

Před prvním použitím přístroj plně nabijte.

Pokud je baterie téměř vybitá, červená kontrolka bliká.

Během nabíjení kontrolka svítí.

Po úplném nabití se kontrolka rozsvítí zeleně.

Po úplném nabití odpojte nabíječku.

Pokud nebyl přístroj delší dobu používán, před opětovným použitím jej nabijte.

JAK PŘÍSTROJ POUŽÍVAT

1. Zapněte přístroj a zvolte požadovaný režim.
2. Naneste na obličej nebo krk vhodný kosmetický přípravek, například sérum, krém nebo gel.
3. Jemně přiložte masážní hlavici na pokožku.
4. Pohybujte přístrojem zdola nahoru, sledujte přirozené kontury obličeje nebo krku.
5. V případě potřeby upravte intenzitu.

UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Přístroj není vodotěsný. Nepoužívejte jej při mytí ani při sprchování.
2. Po použití přístroj otřete měkkým hadříkem. Neoplachujte jej vodou.
3. Při používání přístroje jej držte tak, aby se vaše ruka dotýkala kovového vodivého / indukčního proužku.
4. Přístroj nepoužívejte, pokud máte kardiostimulátor.
5. Přístroj nepoužívejte během těhotenství ani menstruace.
6. K čištění přístroje nepoužívejte alkohol ani korozivní čisticí prostředky.
7. Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí.
8. Přístroj skladujte na chladném a dobře větraném místě, mimo dosah zdrojů tepla.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Název výrobku: GIOperfect EMS Lifting Device

Model: GIO-735

Rozměry výrobku: 132 × 70 × 28 mm

Nabíjecí napětí: 5 V / 1 A

Jmenovitý výkon: 3 W

Provozní napětí: 3,7 V

