

innoGIO



GIOmum Line Simple

Elektrická odsávačka mléka

NÁVOD K POUŽITÍ

GIOMumLine Simple – Elektrický odsavač mléka

Toto je váš multifunkční odsavač mléka GIOMumLine Simple, který vám umožní pohodlnější a diskrétnější odsávání mléka. Je navržen tak, abyste jej mohli používat kdykoli a kdekoli budete chtít. Je malý, lehký a přenosný.

- Elegantní, kompaktní design
- Tichý chod
- Jednoduché a pohodlné použití
- Účinné a efektivní odsávání mléka
- Ideální pro použití doma nebo v kanceláři
- Multifunkční zařízení, které je snadné pro montáž a čištění

Je to uzavřený systém vysoké kvality. Žádná část, která přichází do kontaktu s mateřským mlékem, neobsahuje bisfenolu A (BPA), bisfenolu S (BPS), ftalátů ani polyvinylchloridu (PVC).

Multifunkční elektrický odsavač mléka vám umožní rychle, efektivně a pohodlně odsávat mléko. Montáž je jednoduchá a nenáročná; všechny části lze demontovat, což umožňuje snadné čištění a dezinfekci vroucí vodou.

Doufáme, že multifunkční elektrický odsavač mléka vám pomůže při efektivnějším kojení. Napište nám! Chcete-li se podělit o svou zkušenost nebo příběh o kojení, pošlete nám e-mail na adresu: innogio@innogio.com

Je třeba se dobře připravit.


- Před montáží částí sloužících k odsávání mléka si umyjte ruce vodou a mýdlem a důkladně je osušte.
- Před použitím se ujistěte, že všechny části jsou čisté a suché.

Správné a bezpečné používání odsavače mléka


- Je to produkt osobní hygieny, který by neměl používat více osob.
- Pokud během používání multifunkčního odsavače mléka pocítíte bolest, obraťte se na laktčního poradce, abyste získali profesionální radu a ujistěte se, že používáte správně přizpůsobený nástavec.
- Pokud se vám nedaří odsávat mléko, neponášejte laktátor déle než pět minut najednou.
- Vypněte zařízení předtím, než jej odložíte od prsu.
- Vyhněte se používání silných čisticích prostředků a drsných houbiček nebo houbiček, abyste nepoškrábali ani nezničili odsavač mléka.
- Nedoporučujeme používat UV sterilizátory, protože mohou způsobit zežloutnutí silikonových částí, zkrátit jejich životnost nebo je poškodit.
- Nepoužívejte k čištění vnitřní část ventilu štětku, protože může poškodit ventil nebo zkrátit jeho životnost.
- Vyměňujte ventil každý měsíc, abyste zajistili správné sání, nebo častěji, pokud si všimnete známky opotřebení nebo poškození.
- Všechny ostatní části vyměňujte, když si všimnete známky opotřebení nebo zhoršené funkčnosti, nebo po 3 měsících.
- Uchovávejte všechny části na chladném, suchém místě a chráňte je před přímým slunečním světlem.
- Nemyjte motor odsavače ani napájecí adaptér a nezanořujte je do vody.
- Nabíjejte baterii pouze pomocí adaptéru SV/1-3A s kabelem USB typu C.
- Nepřipojujte odsavač k nabíjení déle než 24 hodin, protože by mohlo dojít k poškození zařízení a/nebo vytvoření nebezpečí.
- Uchovávejte mimo dosah dětí. Zařízení obsahuje malé části, což představuje riziko udušení.

Popis zařízení.....	5
Ovládací panel a displej.....	6
Ukazatel úrovně baterie.....	6
Nabíjení.....	6
Čištění.....	7
Před prvním použitím.....	7
Po každém použití.....	7
Jak sterilizovat.....	7
Přizpůsobení velikosti nástavce.....	8
Návod k použití.....	9
Návod k použití.....	10
Jak používat odsavač mléka.....	11
Příručka pro střídavý režim.....	12
Aktivace masážního stimulatoru laktace.....	13
Odsávání se zapnutým masážním stimulatorem.....	13
Řešení problémů.....	14
Technické specifikace.....	15

Popis zařízení

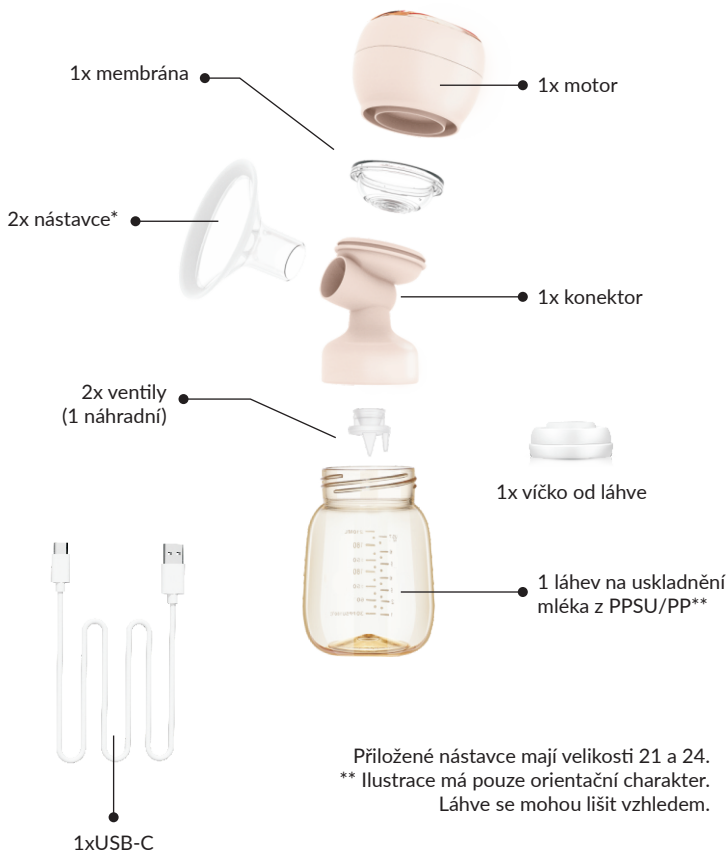

Ovládací panel a displej

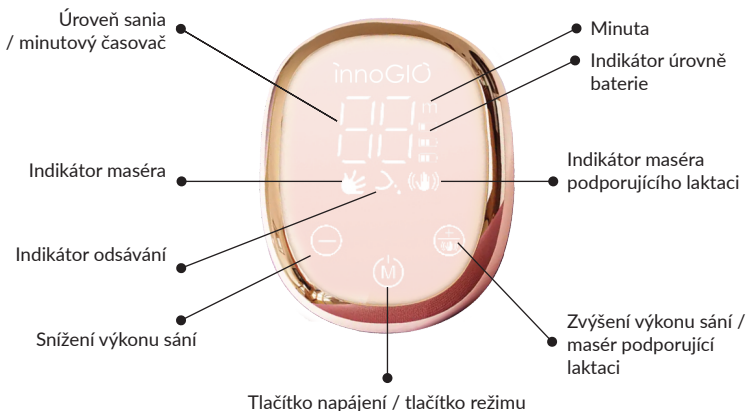

Indikátor úrovně baterie

	Baterie je plně nabitá.
	Úroveň nabití baterie je 30–60 %.
	Baterie je téměř vybitá.
 Blikání	Baterie je téměř vybitá, nabijte zařízení před použitím.

Nabíjení

Abyste nabili zařízení a předešli poškození baterie, připojte kabel USB typu C k napájecí jednotce s napětím 5V a proudem mezi 1A a 3A (5V/1A, 5V/2A, 5V/3A). Většina nabíjecích jednotek pro mobilní telefony, tablety a powerbanky bude fungovat.

V případě potřeby otřete motor nebo napájecí jednotku měkkou vlhkou utěrkou, když je laktátor vypnutý a napájecí jednotka je odpojena od jakéhokoli zdroje napájení. Neměli byste ponořit motor ani napájecí jednotku do vody nebo dezinfekčního roztoku. Myjte a sterilizujte všechny části, které přicházejí do

kontaktu s mateřským mlékem, před prvním použitím a po každém dalším použití.

Čištění

Před prvním použitím

- a. Rozmontujte laktátor na části
- b. Umyjte je v teplé vodě se mýdlem
- c. Dobře opláchněte
- d. Ponořte části do hrnce s vodou a vařte 3-5 minut. Použijte velký hrnec, aby části laktátoru nepřišly do kontaktu se stěnami nebo dnem hrnce.
- e. Otřeste přebytečnou vodu a vysušte na určeném stojanu nebo čisté utěrce.

Po každém použití

- a. Rozmontujte laktátor na části (membrána, konektor, ventil, nástavce a láhev). Odložte části, které nepřišly do kontaktu s mlékem (motor, napájecí jednotka).
- b. Krátce po použití opláchněte zbylé části studenou vodou, abyste je vyčistili od mléka
- c. Umyjte v teplé vodě se mýdlem. Můžete vyčistit ventily jemným třením mezi prsty
- d. Dobře opláchněte
- e. Otřeste přebytečnou vodu a vysušte na určeném stojanu nebo čisté utěrce.

Jak sterilizovat

- a. Postupujte podle pokynů k čištění, kroky 2.a.–2.d.
- b. Ponořte části do hrnce s vodou a vařte 3-5 minut. Použijte velký hrnec, aby části laktátoru nepřišly do kontaktu se stěnami nebo dnem hrnce.
- c. Otřeste přebytečnou vodu a vysušte na určeném stojanu nebo čisté utěrce.



Pozor: Ventily jsou křehké a mohou se snadno poškodit. Proto do nich nedávejte kartáče. Zacházejte s nimi opatrně a pravidelně je vyměňujte.

Parní nebo mikrovlnné sterilizátory jsou také vhodné.

Jak provést měření a najít správnou velikost nástavce

Abyste vybrali doporučenou velikost nástavce, stimulujte bradavku, dokud se neztvrdne, a změřte průměr základny bradavky. Při měření nezohledňujte areolu.

Správně zvolená velikost nástavce je důležitá pro vaše pohodlí a bezpečnost, jakož i účinnost odsávání mléka. Základní doporučená velikost je o 3–4 mm větší než průměr základny bradavky.


Je třeba také zohlednit pocity pohodlí a případnou bolest.

Do nástavce by měla být vložena jen bradavka, bez areoly. Pokud se během odsávání mléka vaše bradavka dotýká tunelu nástavce, nástavec je pravděpodobně příliš malý. Pokud se během odsávání mléka areola bradavky vtáhne do tunelu nástavce, nástavec je pravděpodobně příliš velký.

Pokud máte obavy nebo pochybnosti, měli byste se zkontaktovat s odborníkem, například s poradcem na laktaci.



Změřte bradavku před odsáváním mléka. Pokud jste měřili bradavku během těhotenství, měli byste ji změřit znovu před odsáváním mléka, protože po porodu se může velikost bradavky trochu změnit.

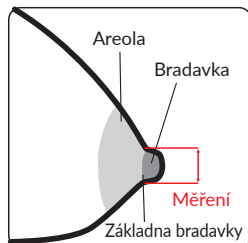

Velikost bradavky	Velikost nástavce
Do 17 mm	21
Do 20 mm	24
Do 23 mm	27
Do 26 mm	30
Do 32 mm	36

Przygotowanie do odciągania pokarmu

1.

Příprava na odsávání mléka. Před montováním částí si umyjte ruce vodou a mýdlem a důkladně je osušte, aby se zabránilo znečištění mléka.



2.

Vložte nástavec do konektoru. Použijte informace na stran. 10 na výběr správné velikosti nástavce.

3.

Vložte ventil do konektoru ze spodní strany.



4.

Přišroubujte konektor na láhev podle směru hodinových ručiček.



5.

Umístěte membránu na vrch konektoru. Ujistěte se, že přiléhá k okraji konektoru, přičemž ji přitiskněte prsty.




Pozor: Ujistěte se, že membrána je zcela suchá před připojením k motoru, abyste ji nepoškodili.

6.

Připojte motor nasazením na membránu.



Jak používat odsávačku

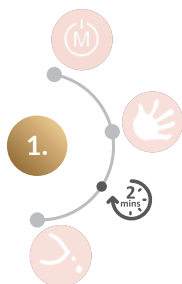

Stiskněte  na chvíli, aby zapnuli laktátor. Na dvě minuty se zapne režim masáže, a pak se automaticky zapne režim odsávání. Pokud kojení začne dříve, můžete manuálně změnit režim pro odsávání stiskem .

Použijte tlačítka pro zvyšování nebo snižování úrovně, abyste nastavili požadovanou sílu. Každý režim má 10 úrovní, od 0 do 9.



Stiskněte tlačítko režimu, aby zapnuli režim střídavý – zapnou se indikátory režimu masáže a odsávání. Režim střídavý bude střídavě zapínat režim masáže a režim odsávání.

Příručka ke střídavému režimu.

Úroveň střídavého režimu:	Činnost střídavého režimu: (Pozor: Ve střídavém režimu zůstává síla režimů masáže a odsávání na dříve vybrané úrovni.)
0	1x masáž, 1x odsávání (opakovat)
1	2x masáž, 1x odsávání (opakovat)
2	3x masáž, 1x odsávání (opakovat)
3	4x masáž, 1x odsávání (opakovat)
4	5x masáž, 1x odsávání (opakovat)
5	6x masáž, 1x odsávání (opakovat)
6	7x masáž, 1x odsávání (opakovat)
7	8x masáž, 1x odsávání (opakovat)
8	9x masáž, 1x odsávání (opakovat)
9	10x masáž, 1x odsávání (opakovat)

Pozor: Odsávačka se automaticky vypne po 30 minutách (doporučuje se odsávat mléko ne déle než 30 minut najednou).

Návod k použití

Aktivace masážního přístroje na podporu laktace

Když je odsávačka vypnutá, stiskněte a držte  abyste zapnuli masážní přístroj na podporu laktace.

Krátce stiskněte , abyste vybrali preferovaný režim masáže AU nebo P spolu s L (samostatný výběr vzoru vibrací a síly).

AU = automatický masážní přístroj, síla je nastavena předem

P = schéma vibrací,

P0–P2 = krátké vibrace,

P3–P5 = krátké a dlouhé vibrace (střídavý cyklus),

P6–P9 = dlouhé vibrace,

L0–L9 = úroveň síly vibrací,

Síla vibrací roste se zvyšující se úrovní.

Režim odsávání s masážním přístrojem pro podporu laktace

Během odsávání držte, abyste zapnuli nebo vypnuli masážní přístroj.



Pozor: Během odsávání mléka nemůžete změnit funkci masážního přístroje, můžete jej pouze zapnout nebo vypnout

Můžete odpojit pohonnou část a využít ji jako masážní přístroj, který může pomoci při otocích prsou, zánětu bradavky a upchaných kanálcích, jakož i zlepšit průtok mléka



Problém	Řešení
Neefektivní/nesprávné odsávání mléka	Zkontrolujte polohu a správné upevnění ventilu. Zkontrolujte stav ventilu a v případě opotřebování jej vyměňte. Nasaďte náhradní ventil, který je součástí balení, pokud jste jej předtím nepoužili. týkající se velikosti nástavce na str. 10
Bolest bradavky/areoly	Zkontrolujte doporučení týkající se velikosti nástavce. Požádejte o radu poradce k laktaci. na bradavky po odsávání mléka může přinést úlevu při podráždění.

Shrnutí důležitých technických specifikací

Vstupní / výstupní proud

100-240V~ 50/60 Hz	5V 1A
--------------------	----------

Typ a kapacita baterie

3,7 V 1800 mAh

Lithium-iontová baterie

Síla sání (přibližně)

-38 až -270 mmHg

44–110 cpm



Povolená teplota



Povolená vlhkost během provozu zařízení



Povolená teplota během přepravy/skladování



Povolená vlhkost během přepravy/skladování



Atmosférický tlak prostředí

Děkujeme, že jste si vybrali produkty InnoGIO!

Abyste správně používali produkt, důkladně si přečtěte návod k obsluze a uschovejte jej pro případ, že budete mít jakékoli dotazy v budoucnosti.

Obrázky v návodu jsou pouze ilustrativní. Pokud by se vyskytly jakékoli rozdíly mezi obrázky a produktem, řiďte se skutečným produktem.

innoGIO

Vyrobeno v Číně pro INNOGIO sp
Ulica Ostródzka 74H, 03-289 Varšava, Polsko

Distributor pro ČR a SR: Andys Czech s.r.o.,
Márova 2805/6, 155 00 Praha 5, www.andys.cz



@innoGIO.official



@innogio_com

